


NowCheck[®] COVID-19 Ag Test

Corona-Schnelltest – unabhängig evaluiert, herausragende Performance

► Antigen-Tests werden in der Regel bei asymptomatischen Personen z. B. in Arztpraxen, Pflegeheimen, Schulen, Kitas oder Unternehmen verwendet, um zuverlässig und schnell eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Sie sind ein wichtiger Baustein in der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der **NowCheck[®] COVID-19 Ag Test** von BioNote ist nachweislich einer der leistungsstärksten am Markt. Der unkomplizierte Nasen-Abstrich kann von Mitarbeitern durchgeführt werden, die zuvor durch medizinisches Fachpersonal geschult wurden.

Partner
des Bundes-
ministeriums für
Gesundheit

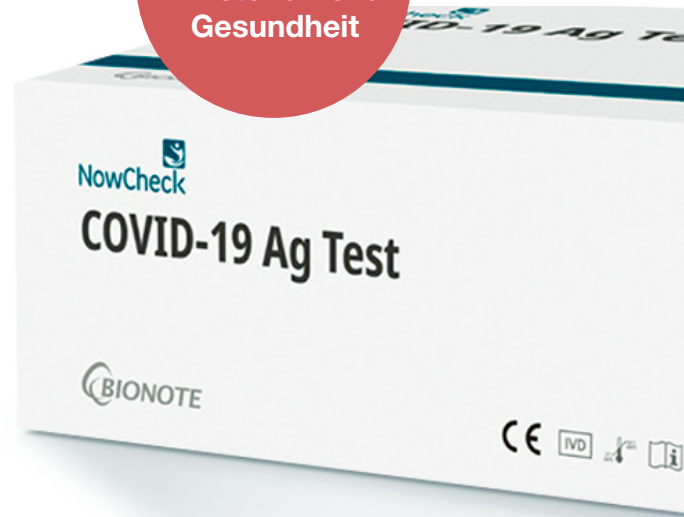

Erkennt auch die neuen Virusmutanten
aus GB, Südafrika und Brasilien



Herausragende Qualität

Geprüft durch das Paul-Ehrlich-Institut und nachweislich einer der sensitivsten Tests am Markt



Jederzeit verfügbar

concile ist Partner des Bundesministeriums für Gesundheit für die Versorgungssicherheit mit Antigen-Tests in Deutschland



Einfache Handhabung

Ergebnis in 15 Minuten, unkomplizierter Nasen-Abstrich, kein Labor oder zusätzliche Geräte erforderlich



Erstattungsfähig, da BfArM-gelistet

Und kostengünstig erhältlich auf shop.concile.de oder direkt bei der concile GmbH in Freiburg

Format	Qualitativer Lateral-Flow-Test
Probe	Nasen-Abstrich oder Nasen-Rachen-Abstrich
Ergebnis	innerhalb von 15 Minuten
Sensitivität*	92,2 %
Spezifität	97,3 %
Packungsgröße	25er-Box, inklusive aller erforderlichen und einzeln verpackten Bestandteile
Lagertemperatur	2–30 °C
Hersteller	BioNote
Vertrieb	concile GmbH

* in den ersten 7 Tagen ab Symptombeginn

Referenzen


- Gelistet vom **BfArM**
- Erstklassige Ergebnisse in einer Evaluierung durch **PEI, RKI, Charité** und **InstMikroBioBw**
- Herausragend abgeschnitten bei einer unabhängigen Evaluierung im Auftrag der **WHO** durch die Foundation of Innovative New Diagnostics (FIND) [🔗¹](https://www.finddx.org/covid-19-oid/sarscov2-eval-antigen)
- Ebenso leistungsstarke Performance wie der Referenztest von Roche Diagnostics in einer Studie des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit

Lieferumfang


Jede Lieferung enthält alle erforderlichen Bestandteile zur Durchführung des Antigen-Tests:

- 25 sterile Tupfer (Nasen-Abstrich)
- 25 sterile Tupfer (Nasen-Rachen-Abstrich)
- 25 einzeln verpackte Pufferlösungen
- 25 Verschlusskappen
- 25 Testkassetten in Folienbeuteln mit Trockenmittel
- 25 Schutzfolien
- eine Gebrauchsinformation


Einfache Testdurchführung

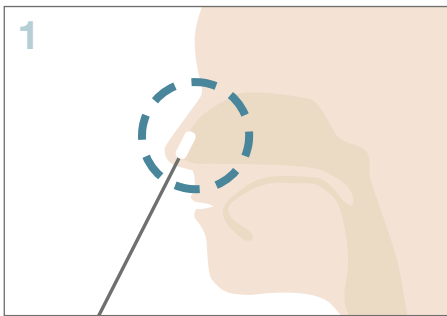


Nach dem Naseputzen Abstrichtupfer in ein Nasenloch einführen, 5- bis 6-mal über die Nasenschleimhaut streichen und Prozedur im anderen Nasenloch wiederholen.

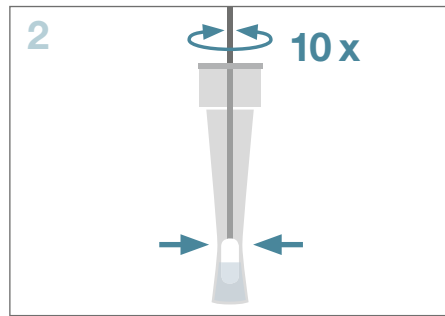


Tupfer in Pufferlösung einführen, unten zusammendrücken und mehr als 10 Rührbewegungen darin vornehmen. Tupfer herausziehen und dabei Druck auf die Seiten des Röhrchens ausüben.

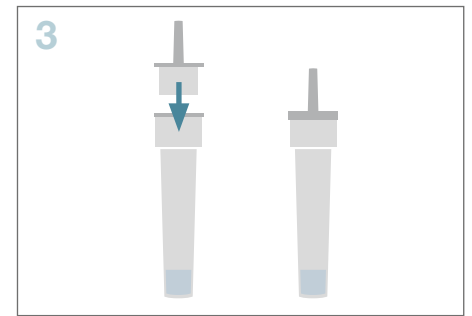

Tropfverschlusskappe auf das Pufferfläschchen drücken.

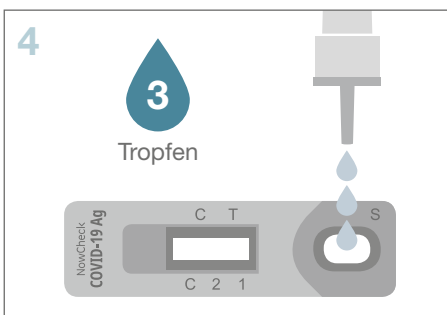

3 Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette geben.

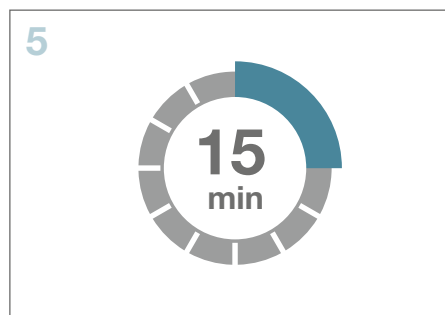

Ergebnis nach 15 Minuten ablesen.

Bestellen Sie die 25er-Box
jetzt kostengünstig auf
shop.concile.de
oder direkt bei der
concile GmbH in Freiburg

¹ <https://www.finddx.org/covid-19-oid/sarscov2-eval-antigen>